

SIMPLY
EASY*



BEAUTY N HEALTH**
The Supra and Perio double effect

Français

* Simplement facile ** Beauté et Santé, le double effet Supra et Perio

SATELEC
ACTEON

L'aéropolissage devient encore plus simple avec

AIR N GO
easy

Fraîcheur
Lutte active
contre la
maladie
parodontale

SATELEC® crée la nouvelle génération d'aéropolisseur portatif AIR-N-GO® easy à double fonction pour :

- Le polissage supra-gingival « Fonction SUPRA » : soins quotidiens de prophylaxie.
- Le polissage sous-gingival « Fonction PERIO » : maintenance, traitements parodontaux et péri-implantaires.

Ce dispositif médical réconcilie simplicité et performance.

Décontamination bactérienne Liberté de mouvement

Simplicité

Supra
Perio



Fiabilité

Flexibilité

Confort

Convertibilité

Prévention

Compatibilité

UNE SEULE PIÈCE À MAIN POUR COUVRIR
UN ÉVENTAIL DE SOINS ET DE TRAITEMENTS

AIR-N-GO easy réunit fonctionnalités essentielles et fiabilité pour faciliter votre quotidien :

- Mise en service rapide : connexion directe sur le raccord turbine.
- Plus grande liberté de mouvement : rotation à 360°, traitements rapides et précis des zones à traiter.
- Nettoyage plus facile de la pièce à main : éléments principaux démontables.

Traitement des
péri-implantites

Puissance et performance Sécurité patient

UNE SOLUTION COMPLÈTE

4 buses pour lutter activement contre la progression de la maladie parodontale.

Selon vos besoins cliniques et sans changer d'instrument, optez pour :

- les poudres « CLASSIC » à base de bicarbonate de sodium
- la poudre « PEARL » à base de carbonate de calcium
- la poudre « PERIO » à base de glycine.



Les buses AIR-N-GO : vos alliées pour prévenir et combattre la maladie

Issues des techniques les plus avancées de modélisation en dynamique des fluides, ces buses confèrent une focalisation précise et constante pour un spray contrôlé quel que soit le cas clinique.
Dans votre pratique quotidienne, ces buses AIR-N-GO® vous apportent puissance et efficacité pour l'élimination du biofilm supra- et sous-gingival.

BUSE AIR-N-GO SUPRA (standard)

- Outil adapté pour tout traitement de prophylaxie en supra-gingival en combinaison avec les poudres AIR-N-GO «CLASSIC» ou «PEARL»
- Garantit un acte rapide et efficace pour un meilleur confort de travail



Cas clinique Dr P. ROUAS (France)

BUSE AIR-N-GO PERIO MAINTENANCE (option)

- Consommation réduite de poudre AIR-N-GO « PERIO » à fines particules en phase de maintenance
- Traitement des mucosites et retour à une situation clinique saine
- Action contre la progression de la maladie parodontale



Cas clinique Dr C. LIM (U.K.)



BUSE AIR-N-GO PERIO EASY (option kit PERIO easy)

- Design innovant en forme de « chausse-pied » pour une insertion sous-gingivale facile
- Véritable atout pour le traitement non-chirurgical sous-gingival de la dent et de l'implant (poches parodontales de 3 à 8 mm)
- 5 secondes par face suffisent



Cas clinique Dr C. LIM (U.K.)

BUSE AIR-N-GO PERIO (option)

- Utilisation pour traitements non-chirurgicaux et chirurgicaux (tunnellisation et lambeaux) en sous-gingival
- Double spray latéral puissant
- Décontamination des poches parodontales profondes (8-10 mm)



Cas clinique Dr A. PATEL (U.K.)



Les poudres **AIR-N-GO** : des solutions sur mesures selon vos besoins cliniques

Les poudres AIR-N-GO® ont été spécialement conçues et étudiées pour prodiguer un traitement agréable, performant et respectueux des surfaces traitées. Toutes ces poudres sont compatibles avec la pièce à main AIR-N-GO easy et ne nécessitent aucun changement d'instrument.

Les poudres « CLASSIC » à base de bicarbonate de sodium (≈ 76 µm)

- Gamme complète de poudres supra-gingivales qui répond aux préférences de vos patients
- Nettoyage minutieux pour des résultats instantanés
- Action d'élimination des colorations et de la plaque bactérienne, même dans les zones difficiles d'accès
- Meilleure acceptation des soins : moins de saignement et de douleur ressentie par le patient


FRAÎCHEUR 100% NATURELLE




5 parfums fraîcheur à base d'arômes 100% naturels ou d'huiles essentielles :
Neutre, Cola, Framboise, Menthe Poivrée et Citron

CONCURRENT


AIR-N-GO

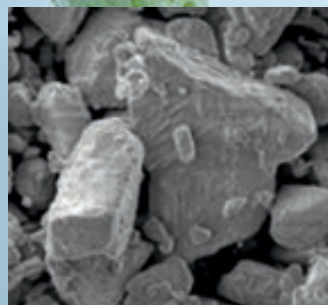


Particules stratifiées à la géométrie agressive (x1000)

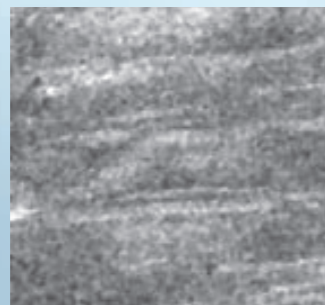

Email traité présentant de nombreuses rayures (x300)

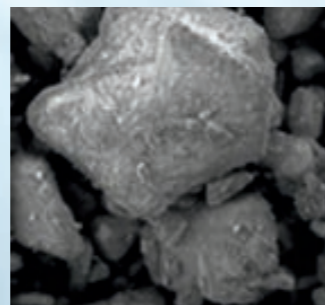

Particules à la géométrie adoucie (x1000)

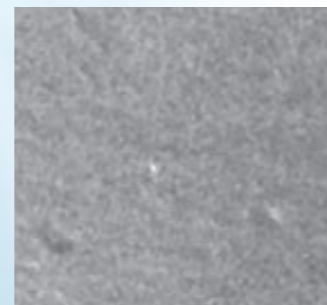


Email traité : surface préservée sans impact ni rayure (x300)

Source : ICMCB CNRS photos M.E.B.

La poudre AIR-N-GO « PEARL » à base de carbonate de calcium naturel (≈ 55 µm)

- Polissage supra-gingival ultra-actif et protection des tissus fragiles
- Réduction de l'acidité du pH provoqué par l'inflammation des tissus ; retour à une flore buccale cliniquement saine
- Restitution de l'éclat naturel et nacré de l'émail des dents
- Nettoyage rapide des taches tenaces et des composites en toute sécurité

Les patients les plus sensibles, présentant une gingivite avancée, apprécieront le soin prodigué avec la « PEARL ».

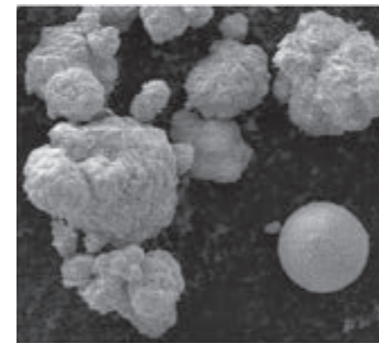

AIR-N-GO « PEARL » (x1000)
Source : ICMCB CNRS photos M.E.B.

HAUTE PERFORMANCE




La poudre AIR-N-GO « PERIO » à base de glycine naturelle (≈ 25 µm)

- Utilisation exclusive pour les traitements sous-gingivaux, en complément de la thérapie initiale
- Faible abrasivité pour une préservation des surfaces traitées (dents et implants) et des zones anatomiques les plus fragiles
- Prévient la progression du biofilm sous-gingival

THÉRAPIE SOUS-GINGIVALE EN PROFONDEUR

Ses propriétés uniques aux avantages multiples :

- Élimination de la plaque : pendant la maintenance parodontale sur les surfaces radiculaires exposées sans sacrifice de substance
- Diminution de la charge bactérienne dans les poches parodontales

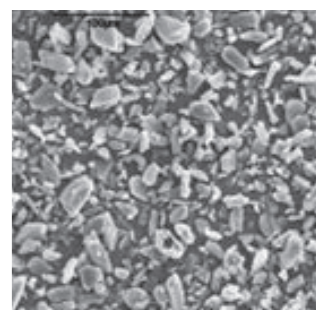








AIR-N-GO « PERIO » (x1000)
Source : ICMCB CNRS photos M.E.B.

AIR N GO *easy*



Une maintenance facilitée

GO SUPRA

Dénomination de la buse	Poudres	Indications
 <p>AIR-N-GO EASY SUPRA 120° Livrée en standard</p>	 <p>« CLASSIC » À base de bicarbonate de sodium Granulométrie moyenne 76 µm PARFUMS : Citron, Menthe Poivrée, Framboise, Cola et Neutre</p>	<p>Finition après détartrage, Préparation au blanchiment, Nettoyage des zones inter-proximales, fissures et sillons, Préparation de la surface dentaire avant mordançage, Nettoyage des bagues orthodontiques, Élimination du biofilm supragingival, plaque, taches et résidus de ciments provisoires</p>
	 <p>« PEARL » À base de carbonate de calcium Granulométrie moyenne 55 µm PARFUM : Neutre</p>	
 <p>AIR-N-GO PERIO EASY Livrée avec le kit PERIO en option</p>	 <p>« PERIO » À base de glycine Granulométrie moyenne 25 µm PARFUM : Neutre</p>	<p>Élimination du biofilm sous-gingival Traitement des maladies parodontales et péri-implantites Poches de 3 mm - 8 mm</p>
 <p>AIR-N-GO PERIO Livrée en option</p>		<p>Traitement des maladies parodontales et péri-implantites Poches de 8 mm - 10 mm</p>
 <p>AIR-N-GO PERIO MAINTENANCE Livrée en option</p>		<p>Maintenance parodontale Poches jusqu'à 4 mm</p>

GO PERIO
Dents & Implants

Pour connaître les bonnes pratiques et utilisations d'AIR-N-GO easy, visualisez notre chaîne

YouTube :



OFFRE COMMERCIALE

Offre standard

Valisette AIR-N-GO easy : pièce à main AIR-N-GO easy avec adaptateur selon modèle (KaVo*, Sirona*, Bien-Air*, W&H*, Midwest*), 1x Buse SUPRA 120°, 1x kit intro de 10 sticks multiparfums de poudre « CLASSIC » et 2x sticks de poudre « PEARL », 1x kit de maintenance AIR-N-GO easy (seringue de graisse silicone, pinceaux applicateur de graisse silicone, joints de remplacement, seringue et canule, forêt)

En option

Kit PERIO easy : buse AIR-N-GO PERIO easy et 1x flacon de poudre 100 g de glycine AIR-N-GO « PERIO »
Livrée seule : buse AIR-N-GO PERIO
Livrée seule : buse AIR-N-GO PERIO Maintenance



* KaVo, Bien-Air, W&H, Sirona et Midwest sont des marques enregistrées.

Ce dispositif médical est classé IIa selon la Directive Européenne applicable en vigueur. Il porte le marquage CE. Organisme notifié : LNE-GMED 0459.
Ce dispositif médical pour soins dentaires est réservé aux personnels de santé ; il n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie.
Ce matériel a été conçu et fabriqué selon un système d'assurance qualité certifié EN ISO 13485. Lire attentivement le manuel d'utilisation disponible sur www.satelec.com/documents. Fabricant : SATELEC (France).