

SOPRUD 617 COLOR LINE

COLOR YOUR PRACTICE



¹ Ligne couleur

² Colorez votre environnement dentaire

Français

IMAGING
ACTEON

THE COLOR LINE

La Caméra SOPRO 617 est utilisée par les dentistes dans plusieurs pays depuis de nombreuses années

La nouvelle SOPRO 617 Color Line a été conçue pour apporter une touche de couleur à votre environnement de travail.



Z

Une caméra en couleur

C'est la première caméra intra-orale proposée en différentes couleurs.

G

Un choix de couleur

Choisissez la couleur de votre SOPRO 617 Color Line qui vous convient le mieux :
Verte – Bleue – Jaune – Rouge ou le bronze de la version standard.

S

E



SOPRO 617

SIMPLE

Une communication facilitée

La SOPRO 617 Color Line simplifie la communication avec vos patients au travers d'images intraorales qui apportent un support visuel à vos explications.



Une ergonomie étudiée


L'angle de vision à 105° de la SOPRO 617 Color Line permet d'accéder plus facilement aux zones distales de la dentition du patient.

Une seule mise au point

La SOPRO 617 Color Line ne nécessite aucun réglage de mise au point.

Une luminosité uniforme

8 LED ont été associées à un condenseur de lumière pour uniformiser la luminosité de l'image, quelle que soit la distance d'observation.

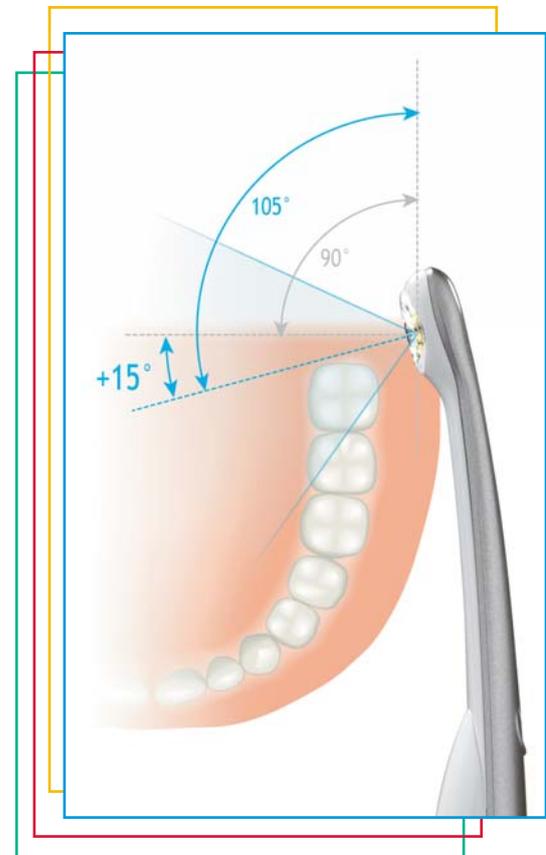



Des images nettes instantanément !

La grande profondeur de champ de la SOPRO 617 Color Line vous permet d'obtenir une image nette sans ajustement.

Un gel d'image tactile

Capturez les images en effleurant la SoproTouch®.



RAPIDE

Une vitesse d'obturation automatique

La vitesse d'obturation de la SOPRO 617 Color Line s'adapte en continu pour une luminosité constante de vos images.

Plug and play!

La SOPRO 617 Color Line est compatible avec toutes les configurations (Windows, MAC, Vidéo), et peut s'intégrer sur votre fauteuil dentaire.



SOPRO 617 COLOR LINE

Caractéristiques Techniques



036089a
PEFC / 10-31-1303



- CCD 1/4" haute sensibilité
- Résolution : (752x582) PAL; (768x494) NTSC
- Définition : 470 lines
- Sensibilité : 2 lux
- Eclairage : 8 LED
- Ajustement : automatique
- Gel d'images par SoproTouch® ou pédale (option)
- Angle de vue : 80°
- Champs de vision : 105°
- Longueur du câble : 2,5 m (option : 5 et 7 m)
- Taille de la pièce à main : L. 205mm x l. 28 mm x H. 24 mm
- Taille de la partie utile : l. 16mm x H. 11.10 mm
- Poids : 55 g



Mac



Windows®



DOCK M_VIDEO

- Mémoire 1 et 4 images
- Alimentation : 115 V ~ 60 Hz & 230 V - 50 Hz
- Consommation : 9 VA
- 1 sortie Vidéo PAL ou NTSC
- 1 sortie S-Vidéo PAL ou NTSC
- Dimensions du dock en mm : L. 145 x l. 130 x H. 35
- Poids du dock : 245 g

DOCK M_USB2

- Mémoire 1 et 4 images
- Alimentation : 115 V ~ 60 Hz & 230 V - 50 Hz
- Consommation : 9 VA
- 1 sortie Vidéo PAL ou NTSC
- 1 sortie S-Vidéo PAL ou NTSC
- 1 sortie USB 2.0
- Dimensions du dock en mm : L. 145 x l. 130 x H. 35
- Poids du dock : 245 g

DOCK USB2

- 1 sortie USB 2.0
- Dimensions du dock en mm : L. 100 x l. 46 x H. 20
- Poids du dock : 165 g

DOCK MU_VIDEO

- Mémoire 1 et 4 images
- Alimentation : 24 V ~ ; 50 Hz - 60 Hz
- Consommation : 10 VA
- 1 sortie Vidéo PAL ou NTSC
- 1 sortie S-Vidéo PAL ou NTSC
- Dimensions du dock en mm : L. 100 x l. 72 x H. 36
- Poids du dock : 190 g

DOCK MU_USB2

- Mémoire 1 et 4 images
- Alimentation : 24 V ~ ; 50 Hz - 60 Hz
- Consommation : 10 VA
- 1 sortie Vidéo PAL ou NTSC
- 1 sortie S-Vidéo PAL ou NTSC
- 1 sortie USB 2.0
- Dimensions du dock en mm : L. 100 x l. 172 x H. 36
- Poids du dock : 190 g

DOCK U_USB2

- Alimentation : 24 V ; 50 Hz - 60 Hz
- Consommation : 15 VA
- 1 sortie USB 2.0
- Dimensions du dock en mm : L. 50 x l. 75 x H. 36
- Poids du dock : 76 g

Configuration minimale Windows®

- Système d'exploitation : Windows® XP Pro SP3
- Processeur : Intel® Pentium IV - 1,3 GHz
- Mémoire : 512 Mo
- Disque dur : 250 Go
- Ports USB : 2 ports USB 2.0 Hi-Speed
- Carte vidéo : 32 Mo RAM non partagée compatible DirectX 9.
- USB Chipset : Intel ou NEC® / RENESAS®
- Résolution écran : 1024 x 768

Configuration recommandée Windows®

- Système d'exploitation : Windows® 7 Pro SP1
- Processeur : Intel® Core i3 ou plus
- Mémoire : 2 Go ou plus
- Disque dur : 500 Go ou plus
- Ports USB : 4 ports USB 2.0 Hi-Speed
- Carte vidéo : Chipset Nvidia ou ATI / 512 Mo RAM non partagée compatible DirectX 9.
- USB Chipset : Intel ou NEC® / RENESAS®

- Résolution écran : 1280 x 1024 ou plus Configuration minimale MAC®
- Ordinateur : MAC® Book Pro 13.3" ou iMac® 21.5"
- Système d'exploitation : MAC® OS X 10.9
- Processeur : Intel® Core 2
- Mémoire : 2 Go

Configuration recommandée MAC®

- Ordinateur : iMac® 27"
- Système d'exploitation : MAC® OS X 10.9
- Processeur : Intel® Core i7
- Mémoire : 4 Go



SOPRO 617®, caméra intra-orale est un dispositif médical fabriqué et commercialisé par SOPRO. Ce dispositif médical pour soins dentaires est réservé aux professionnels de santé et n'est pas remboursé par les organismes d'assurance maladie. Lisez attentivement les instructions figurant dans la notice avant toute utilisation. Classe IIa / Organisme notifié : CE 0459 LNE-GMED.
Date d'établissement de la plaquette : Octobre 2014

